


Merilnik glukoze Contour

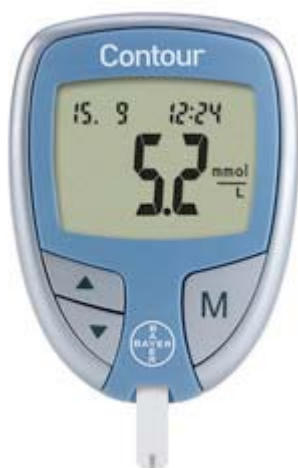

Lastnosti:

- meritev traja 5 sekund
- kodiranje ni potrebno
- velikost vzorca je 0,6 μ l
- merilnik je umerjen na plazmo/serum
- **MERILNIK IMA 2 NAČINA DELOVANJA**
- omogočeno je označevanje meritev in opomnik
- območje merjenja se razteza od 0,6 do 33,3 mmol/L
- univerzalen vzorec krvi (kapilarna, venozna, arterialna in neonatalna, pri novorojenčkih starejših od 24 ur)
- možnost merjenja iz vzorca krvi, odvzetega iz alternativnega mesta
- samodejna zaznava kontrolne meritve in temperature
- življenjska doba baterije omogoča 1.000-2.000 meritev

Brez kodiranja

Bistvena prednost merilnika Contour je, da ga ni potrebno kodirati.

Študije so namreč dokazale, da kar eden od petih pacientov merilnika ne kodira oziroma ga kodira napačno, kar lahko privede v povprečju do 43 % odstopanj rezultata meritve. To v praksi pomeni 4 mmol/L razlike.

2 načina delovanja

Vsak posameznik sprejema svojo bolezen drugače in tako tudi ravna z njo. Novost novega merilnika CONTOUR sta 2 načina delovanja, kar pomeni, da je merilnik osebno prilagodljiv.

Osnovni način (L1) omogoča enostavno merjenje, brez kodiranja, v le dveh korakih.

Napredni način (L2) združuje enostavnost načina 1, ki mu doda nekatere uporabne osebno prilagodljive funkcije:

- označevalniki meritev pred in po obroku,
- opomnik za meritev po obroku,
- osebno prilagodljive visoke in nizke meje glukoze ter
- označitev "posebnega" rezultata meritve.

Avtomatizirane funkcije

Samodejno zaznavanje temperature in izločanje vplivov drugih dejavnikov uporabniku omogoča preprosto uporabo, brez posebnega uvajanja ali predznanja.

Prenos in obdelava rezultatov z osebnim računalnikom

Merilnik Contour je možno povezati z osebnim računalnikom. Program Glucofacts Deluxe (priložen na CD-ju), v slovenskem jeziku, omogoča prenos, obdelavo in hranjenje podatkov iz spomina merilnika